



E1-秦皇岛妇幼200配置2 SBC卡顿及多个部件报错

| 现场案例分析总结

□ 内容：

1. 现场问题描述
2. 客户端数据整理清单
3. 数据分析和排查方向
4. 现场FSE/FAS排查小结/现存关键问题梳理
5. 下一步计划

01 现场问题描述

SN:130340230055 200配置2 ECR5.1版本

问题1: 11.23号 测序卡顿停止, PUI无报错, 同时观察到zlims断开连接;
卡顿几个小时后, 屏幕黑屏(但鼠标能动), 断电重启后, 重新上机正常



01现场问题描述

问题2：12月8日 滑台故障导致测序中止，客户反馈SBC操作卡顿，无法在系统中重启 windows，两次断电重启后才重新上机。


```

485 2023-12-08 18:29:53.2845 | INFO | 76 | GetFieldOffset: 4, Y: 165. Type: RegistrationBefore, Slide: K450008596, Lane: 001, Cycle:
486 2023-12-08 18:29:53.2845 | INFO | 76 | Execute RegistrationAtField method the xOffset is -1.12909090909091, yOffset is -46.575
487 2023-12-08 18:29:53.6075 | INFO | 76 | GetFieldOffset: 2, Y: 0. Type: RegistrationAfter, Slide: K450008596, Lane: 001, Cycle: 50
488 2023-12-08 18:29:53.7635 | INFO | 76 | Location: result:0, confPctOfCol:1, confPctOfRow:1, fovCol:16, fovRow:5
489 2023-12-08 18:29:53.7635 | INFO | 76 | SetTheta. From 0 to -0.000735787864460397.
490 2023-12-08 18:29:53.7635 | INFO | 76 | Start Calc AOffset...
491 2023-12-08 18:31:28.6845 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:MoveY, state:InError
492 2023-12-08 18:31:28.8565 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
493 2023-12-08 18:31:29.1895 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
494 2023-12-08 18:31:30.9785 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
495 2023-12-08 18:31:31.2325 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
496 2023-12-08 18:31:31.5935 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
497 2023-12-08 18:31:31.7535 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
498 2023-12-08 18:31:32.1745 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
499 2023-12-08 18:31:32.4365 | ERROR | 76 | ACSStateChangd axis:XY, action:EnabledAllAxis, state:InError
500 2023-12-08 18:31:32.4365 | ERROR | 76 | ACSError:21, ACSRecover cost:1974ms
501 2023-12-08 18:31:32.4515 | ERROR | 76 | Device Exception Devic=7 Code=5 BGI.Common.Utils.BGIDeviceException: Instrument encounter
502 在 BGI.Control.Device.Physical.VACSSStage.Panic()
503 在 BGI.Control.Scann C:\BGI\Logs\BGI.ZebraV01Seq.Service-Scanner-0.<StageStateEventBindings>b_0(EnumACSAxis axis, String action, EnumACSState state)
504 在 BGI.Control.Device 20231208.log - Notepad++ (EnumACSState value)
505 在 BGI.Control.Device.Physical.VACSSStage.MoveXY(Double x, Double y, Boolean relativ | IncorporationImage | D:\Jenkins\
506 2023-12-08 21:53:29.1094 | Log name 'Scanner' created for Instrument '130340230055' Application: 'BGI.ZebraV01Seq.Se
507 2023-12-08 21:53:29.2564 | ACSStateChangd Event Binding

```

01现场问题描述

问题3：12月9日 测序开始后报错E8-SO-13，从日志看是液路电磁阀通讯超时，续测后130cycle左右再次报错液路电磁阀超时，客户反馈测序仪又出现黑屏现象。

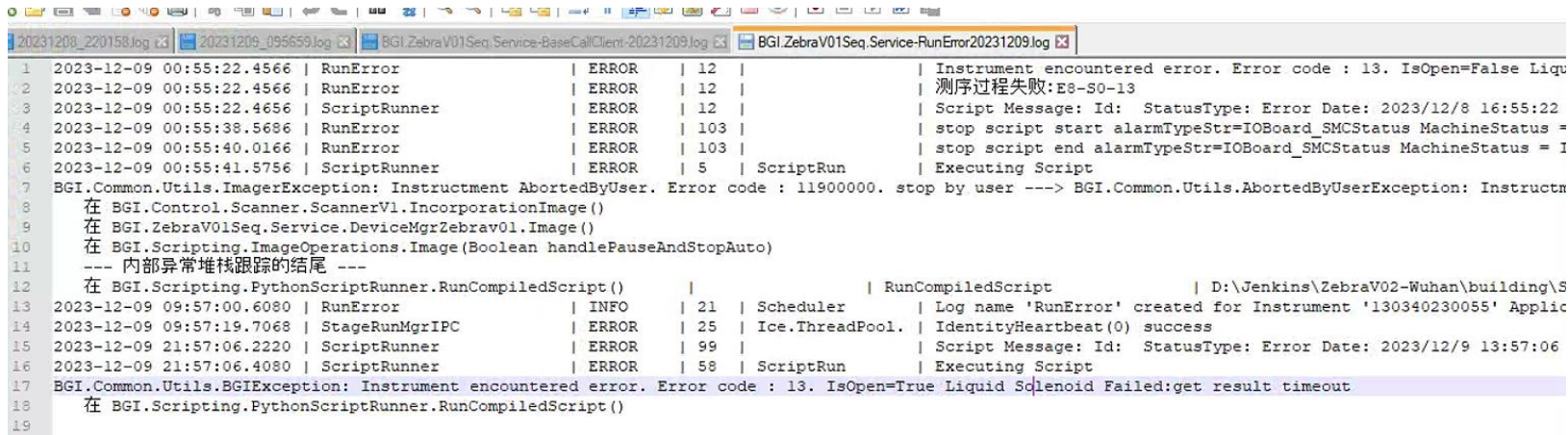

```

20231208_220158.log 20231209_095659.log BGI.ZebraV01Seq.Service-BaseCallClient-20231209.log BGI.ZebraV01Seq.Service-RunError20231209.log
1 2023-12-09 00:55:22.4566 | RunError | ERROR | 12 | | Instrument encountered error. Error code : 13. IsOpen=False Liqu
2 2023-12-09 00:55:22.4566 | RunError | ERROR | 12 | | 测序过程失败:E8-SO-13
3 2023-12-09 00:55:22.4656 | ScriptRunner | ERROR | 12 | | Script Message: Id: StatusType: Error Date: 2023/12/8 16:55:22
4 2023-12-09 00:55:38.5686 | RunError | ERROR | 103 | | stop script start alarmTypeStr=IOBoard_SMCStatus MachineStatus =
5 2023-12-09 00:55:40.0166 | RunError | ERROR | 103 | | stop script end alarmTypeStr=IOBoard_SMCStatus MachineStatus = 1
6 2023-12-09 00:55:41.5756 | ScriptRunner | ERROR | 5 | ScriptRun | Executing Script
7 BGI.Common.Utills.ImagerException: Instructment AbortedByUser. Error code : 11900000. stop by user ---> BGI.Common.Utills.AbortedByUserException: Instructment
8 在 BGI.Control.Scanner.ScannerV1.IncorporationImage()
9 在 BGI.ZebraV01Seq.Service.DeviceMgrZebraV01.Image()
10 在 BGI.Scripting.ImageOperations.Image(Boolean handlePauseAndStopAuto)
11 --- 内部异常堆栈跟踪的结尾 ---
12 在 BGI.Scripting.PythonScriptRunner.RunCompiledScript() | RunCompiledScript | D:\Jenkins\ZebraV02-Wuhan\building\S
13 2023-12-09 09:57:00.6080 | RunError | INFO | 21 | Scheduler | Log name 'RunError' created for Instrument '130340230055' Applic
14 2023-12-09 09:57:19.7068 | StageRunMgrIPC | ERROR | 25 | Ice.ThreadPool. | IdentityHeartbeat(0) success
15 2023-12-09 21:57:06.2220 | ScriptRunner | ERROR | 99 | | Script Message: Id: StatusType: Error Date: 2023/12/9 13:57:06
16 2023-12-09 21:57:06.4080 | ScriptRunner | ERROR | 58 | ScriptRun | Executing Script
17 BGI.Common.Utills.BGIException: Instrument encountered error. Error code : 13. IsOpen=True Liquid Solenoid Failed:get result timeout
18 在 BGI.Scripting.PythonScriptRunner.RunCompiledScript()
19
  
```

4.5°C 20.0°C

后退 警报

等级	时间	描述
error	12/13/2023 14:37:07	ZLIMS连接异常

< 1/1 >

2023 / 12 / 13 14:40

[illegible]

01 现场排查

12.13 断开服务器网线，模拟zlims，使测序仪单机状态，运行QC，结果正常，后续客户上机真实样本，测序结果正常（依旧单机状态）



03 下一步计划

1.多个部件频繁报错，但实际实验结果良好，各部件硬件本身故障可能性低，怀疑通讯问题导致。

2 每次故障伴随SBC卡顿甚至服务器SBC卡顿，需确认是否是客户halos服务器导致，还是SBC故障导致，客户端目前更换SBC且断开服务器仪器正常，需查明原因。

日志如下：



Logs.zip

E1研发回复：从故障描述几个报错(屏幕卡顿黑屏/滑台故障/液路电磁阀通讯超时/Zlims报错)前三个都和SBC及其通讯有关，Zlims报错可能和halos服务器协议相冲突，更换SBC后故障不再复现，定义为硬件故障，E1工单暂时打回，若复现再升级。

Thanks for your
time!
感谢!

华大智造
MGI

深圳市盐田区北山工业区11栋

Building No.11, Beishan Industrial Zone, Yantian District, Shenzhen 518083, China

MGI-service@mgi-tech.com | www.mgi-tech.com